

SA-H850、SA-H1000、SA-H1700、SA-W1700専用オプション

人にやさしい環境対策

滅菌に使用した酸化エチレンガスを
1ppm以下に処理して排出します。


酸化エチレンガス除去装置

ECO-SR530
ECO-SR730
ECO-SR735

滅菌器から排出される酸化エチレンガスを、触媒酸化方式により、環境にやさしいガス濃度まで処理して屋外排気します。

滅菌器の排気ホースを接続し、装置本体の排気ホースを屋外に誘導するだけで、人体に有害な酸化エチレンガスを1ppm以下に処理して排出します。また、排気EO濃度監視機能をはじめ各種安全機能を装備しておりますので、酸化エチレンガス滅菌器をより安心してご使用いただけます。

概念図

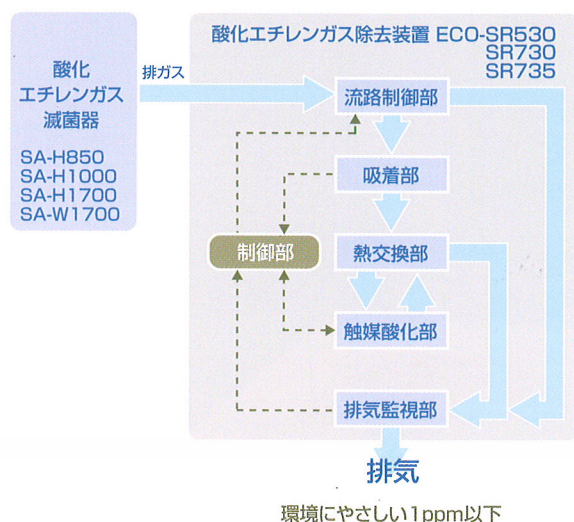

■ECO-SR530
SA-H850・H1000に接続できます。



■ECO-SR730
SA-H1700に接続できます。



■ECO-SR735
SA-W1700に接続できます。

主な仕様

型式	ECO-SR530	ECO-SR730	ECO-SR735
方式	触媒酸化方式		
処理後EO濃度	1ppm以下		
安全装置	過電流・漏電ブレーカー 触媒ヒーター温度異常上昇検出 反応槽出口温度異常上昇検出 吸着槽温度異常上昇検出		
主なチェック機能	触媒熱電対断線検出 触媒ヒーター断線検出 反応槽出口温度熱電対断線検出 排ガス濃度検出		
使用環境	周囲温度 10℃～40℃ 相対湿度 30%～75%		
電源	AC100V ±10% 50/60Hz 6A ±10%		
外形寸法	588(幅)×888(奥行)×650(高さ)mm SA-H1000組合せ時： 588(幅)×888(奥行)×1,360(高さ)mm	648(幅)×1,072(奥行)×650(高さ)mm SA-H1700組合せ時： 648(幅)×1,072(奥行)×1,420(高さ)mm	728(幅)×1,002(奥行)×730(高さ)mm SA-W1700組合せ時： 728(幅)×1,002(奥行)×1,420(高さ)mm
重量	約105kg	約131kg	約131kg
対応機種	イオジェルク SA-H850・H1000専用	イオジェルク SA-H1700専用	イオジェルク SA-W1700専用

※仕様は一部変更することがあります。