

イオジェルク SA-H160

イオジェルク SA-H360

イオジェルク SA-H540

方式	カートリッジ式全自動方式		
缶体寸法	240(内径)×381(奥行)	320(内径)×483(奥行)	320(内径)×703(奥行)
缶体内容積	約16リットル	約36リットル	約54リットル
コンディション時間	コースI 20分(可変範囲 10分~48時間)	コースI 40分(可変範囲 10分~48時間)	
	コースII 20分(可変範囲 10分~48時間)	コースII 40分(可変範囲 10分~48時間)	
標準作用温度	コースI 55℃(可変範囲 20℃~60℃)		
	コースII 55℃(可変範囲 20℃~60℃)		
標準作用時間	コースI 2時間(可変範囲 10分~48時間)		
	コースII 2時間(可変範囲 10分~48時間)		
空気置換時間	コースI 2時間		
	コースII 2時間		
エアレーション時間	コースI 14時間(可変範囲 10分~48時間)		
	コースII 14時間(可変範囲 10分~48時間)		
缶体使用圧力	大気圧~-76kPa		
空気置換方式	吸排気交互方式	エアフロー方式/吸排気交互方式	
エアレーション方式	吸排気交互方式		
使用滅菌ガス	エキテック95 15g(EO 95 vol% CO ₂ 適量) 1本/1回	エキテック95 33g(EO 95 vol% CO ₂ 適量) 1本/1回	エキテック95 50g(EO 95 vol% CO ₂ 適量) 1本/1回
安全装置	缶体温度ヒューズ・ガス導入エラー警報・缶体温度異常上昇警報		
付加機能	作用温度補償・空気漏れ検出・真空引き不良検出・フィルター目詰まり検出		
使用環境	周囲温度 10℃~40℃ 相対湿度 30%~75% 気圧 860hPa~1060hPa		
電源	AC100V 1.5A	AC100V 2.2A	AC100V 2.5A
電源周波数	50/60Hz		
分類	電撃に対する保護の形式 クラス I 機器		
外形寸法 (ゴム足含む)	324(幅)×438(奥行)×375(高さ)mm(ゴム足含む)	452(幅)×556(奥行)×434(高さ)mm(ゴム足含む)	452(幅)×776(奥行)×434(高さ)mm(ゴム足含む)
		専用架台使用時:452(幅)×556(奥行)×1170(高さ)mm	専用架台使用時:452(幅)×776(奥行)×1170(高さ)mm
質量	約25kg	約35kg(専用キャビネット架台 約25kg)	約43kg(専用キャビネット架台 約35kg)
滅菌ガス濃度	酸化エチレンガス 約900mg/リットル		
圧力計	液晶表示部にデジタル表示		
温度計	液晶表示部にデジタル表示		
医療機器の種別	管理医療機器 特定保守管理医療機器 設置管理医療機器		
一般的名称	エチレンオキシドガス滅菌器(JMDNコード 13740000)		
製造販売業者	株式会社イキ(製造販売業許可番号:25B2X10002)(製造業許可番号:25BZ200007)		
認証番号	222AGBZX00291000	223AGBZX00099000	223AGBZX00100000
専用オプション	酸化エチレンガス排ガス吸着器<クリーンボトル>		酸化エチレンガス除去装置<ECO-SR230>
		専用キャビネット架台 452(幅)×556(奥行)×755(高さ)mm	専用キャビネット架台 452(幅)×776(奥行)×755(高さ)mm

Option オプション


酸化エチレンガス除去装置
ECO-SR230

人にやさしい環境対策

『特定化学物質』の酸化エチレンガスを、安全濃度1ppm以下に処理して排出します。

滅菌器から滅菌終了後に排出される酸化エチレンガスを、触媒燃焼方式を採用した《ECO-SR230》により、環境にやさしいガス濃度まで処理して屋外排気します。

《ECO-SR230》に滅菌器の排気ホースを接続し、装置本体の排気ホースを屋外に誘導するだけで、人体に有害な酸化エチレンガスを1ppm以下に処理して排出します。また、排気EO濃度監視機能をはじめ各種安全機能を装備しておりますので、酸化エチレンガス滅菌器をより安心してご使用いただけます。

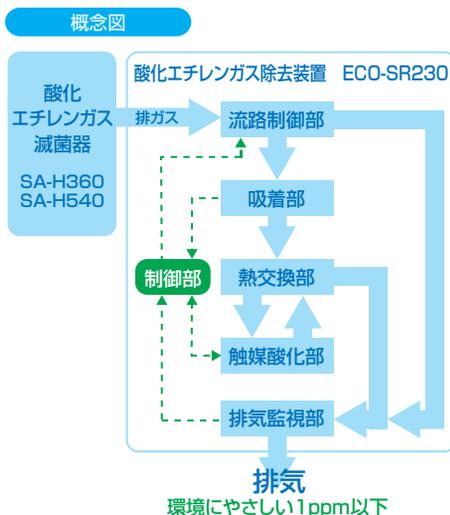

主な仕様

型式	ECO-SR230
方式	触媒による燃焼方式
処理後EO濃度	1ppm以下
安全装置	過電流・漏電ブレーカー 触媒ヒーター温度異常上昇検出 反応槽出口温度異常上昇検出 吸着槽温度異常上昇検出
付加機能	触媒熱電対断線検出 触媒ヒーター断線検出 反応槽出口温度熱電対断線検出 排ガス濃度検出
使用環境	周囲温度 10℃~40℃ 相対湿度 30%~75%
電源	AC100V ±10% 50/60Hz 6A ±10%
外形寸法	452(幅)×776(奥行)×755(高さ)mm
重量	約90kg
対応機種	イオジェルク SA-H360 SA-H540 ※各機種2段階み仕様も可能

※仕様は一部変更することがあります。