

医療用不織布製品 エルクロス

EL-CLOTH

総合カタログ

M e d i c a l U n w o v e n F a b r i c C A T A L O G



エルクコーポレーションは「健康文化創造企業」の経営理念の下、国民の健康に寄与することをコンセプトにヘルスケア事業を展開しています。その中の感染管理に関する事業においても、同じコンセプトの元、エビデンスに基づいて取扱製品の充実に努めてまいりましたが、このたび、皆様に不織布関連製品の総合カタログをお届けできる運びとなりました。

一般的に不織布とは、様々な素材の繊維を熱・機械的または化学的な作用によって接着または絡み合わせることで布にしたものを言いますが、糸状の繊維を織って作る布と比較して、以下のような特徴を持っています。

- ランダムに結合されたものは強度や伸びなどに方向性を持たない。
- 大量生産ができ、安価でもある。
- 複数の素材を容易に組み合わせることができる。
- 厚みや空隙を簡単に変更できる。

(Wikipedia より引用)

このような特徴を活かして、多種多様な不織布製品が作られていますが、この中で医療用不織布製品は、その目的や用途に応じて様々な性能が要求されます。

特に、患者様の治療に直接的に関わる医療の最前線である手術時に使用されるガウンやドレープといった不織布製品には、強度、発塵性、防御性能、快適性といった多面からの、より厳しい性能が要求されます。

私どもは、ANSI/AAMI（米国規格協会 / 米国医療器具振興協会）PB70 による性能分類において最も防御性能の高いレベル 4 に準拠した不織布をはじめ、皆様の多様な使用用途にお応えできるよう、豊富な製品を取り揃えております。

また、器材の洗浄時や記憶に新しい SARS や新型インフルエンザ等の感染対策に使用する P.P.E.（個人防護具）についても、ご要望に応じた提案をいたします。

ぜひとも、皆様から、お問い合わせやご要望を賜りますよう、本カタログを通じて貴院の感染対策のお役に立てることを、心より願っております。

株式会社エルクコーポレーション
営業統括本部 感染管理グループ

INDEX



ガウン / ウエア

サージカルガウン	01
涼感サージカルガウン・処置用ガウン	02
アンダーウエア	02



マスク / キャップ

サージカルマスク	03
N-95マスク	04
ドクターキャップ/サージカルキャップ/ナースキャップ	05
シューズカバー/オイフテープ/アームカバー/器械台カバー/メイヨスタンドカバー	06



ドレープ

EL-CLOTH (エルクロス) ドレープの特徴	07
DMDシリーズ/HMDシリーズ/FMDシリーズ	08

全身ドレープ

アッペ用ドレープ (HMD) /外科用開腹ドレープ (FMD)	09
外科用開胸ドレープ (FMD) /心臓外科用ドレープ (FMD) / 脳外科用ドレープ (FMD) /伸縮円穴ドレープ (FMD)	10
関節鏡用ドレープ (FMD) /CHS用ドレープ (FMD) / U型ドレープ (FMD) /ラパコレ用ドレープ (FMD)	11
婦人科用ドレープ (FMD) /泌尿器科用ドレープ (FMD) /カテ検査用ドレープ (HMD)	12



眼科用ドレープ

眼科用ドレープ	13・14
---------	-------



その他

アイソレーションガウン/袖付PEガウン	15
ソフトPEエプロン/ディスポシート・滅菌シート/ロールシート	16

ガウン / ウエア



サージカルガウン (S)

● 特徴 ●

装用感と機能の両立をコンセプトに、着る人のことを一番に考えて作られたガウン/ウエアです。

サージカルガウン (S)

液体や粒子に対するバリア性の高い SMMS 不織布製のサージカルガウンです。

商品名	規格	ケース入数
ELKサージカルガウン (S)	SSG-10Y(Mサイズ)	20枚×2箱 (40枚)
ELKサージカルガウン (S)	SSG-20Y(Lサイズ)	20枚×2箱 (40枚)
ELKサージカルガウン (S)	SSG-30Y(LLサイズ)	20枚×2箱 (40枚)
ELKサージカルガウン (S)	SSG-40Y(3Lサイズ)	20枚×2箱 (40枚)
ELKサージカルガウン (S)	SSG-11Y(Mサイズ)	20枚×2箱 (40枚)
ELKサージカルガウン (S)	SSG-21Y(Lサイズ)	20枚×2箱 (40枚)
ELKサージカルガウン (S)	SSG-31Y(LLサイズ)	20枚×2箱 (40枚)
ELKサージカルガウン (S)	SSG-41Y(3Lサイズ)	20枚×2箱 (40枚)

※滅菌済



サージカルガウン (P)

サージカルガウン (P)

綿布に近い風合いの着心地の良いサージカルガウンです。撥水性、通気性に優れています。

商品名	規格	ケース入数
ELKサージカルガウン (P)	PSG-10Y(Mサイズ)	20枚×2箱 (40枚)
ELKサージカルガウン (P)	PSG-20Y(Lサイズ)	20枚×2箱 (40枚)
ELKサージカルガウン (P)	PSG-30Y(LLサイズ)	20枚×2箱 (40枚)
ELKサージカルガウン (P)	PSG-11Y(Mサイズ)	20枚×2箱 (40枚)
ELKサージカルガウン (P)	PSG-21Y(Lサイズ)	20枚×2箱 (40枚)
ELKサージカルガウン (P)	PSG-31Y(LLサイズ)	20枚×2箱 (40枚)

※滅菌済



涼感サージカルガウン



涼感サージカルガウン
(後ろ姿)

涼感サージカルガウン

3種類の素材を組み合わせています。

前面には吸水性、袖部分には撥水性、背面には通気性の高い素材を使用し、異なったそれぞれの部位において最も求められる性能を実現しています。

商品名	規格	ケース入数
涼感サージカルガウン	RSG-10Y(Mサイズ)	20枚×2箱(40枚)
涼感サージカルガウン	RSG-20Y(Lサイズ)	20枚×2箱(40枚)
涼感サージカルガウン	RSG-30Y(LLサイズ)	20枚×2箱(40枚)

※滅菌済



処置用ガウン(後ろ姿)

処置用ガウン



処置用ガウン

背中部分の重なるの少ない簡易的な処置用ガウンです。

商品名	規格	ケース入数
ELK処置用ガウン	KSG-F(フリーサイズ)	50枚

※滅菌済



アンダーウエア

アンダーウエア

吸水性素材で着心地の良いアンダーウエアです。使い勝手の良いポケット付きです。

商品名	規格	ケース入数
アンダーウエア男性用シャツ	DS-M(50㍑)	50枚×2箱(100枚)
アンダーウエア男性用シャツ	DS-L(50㍑)	50枚×2箱(100枚)
アンダーウエア男性用シャツ	DS-XL(50㍑)	50枚×2箱(100枚)
アンダーウエア男性用ズボン	DP-M(50㍑)	50枚×2箱(100枚)
アンダーウエア男性用ズボン	DP-L(50㍑)	50枚×2箱(100枚)
アンダーウエア男性用ズボン	DP-XL(50㍑)	50枚×2箱(100枚)
アンダーウエア女性用シャツ	NS-M(50㍑)	50枚×2箱(100枚)
アンダーウエア女性用シャツ	NS-L(50㍑)	50枚×2箱(100枚)
アンダーウエア女性用ズボン	NP-M(50㍑)	50枚×2箱(100枚)
アンダーウエア女性用ズボン	NP-L(50㍑)	50枚×2箱(100枚)

マスク / キャップ



サージカルマスク エルガード

サージカルマスク

● 特徴 ●

<エルガード>

- ・フィルター性能が高く腰の強い、特殊加工メルトブロー素材を使用したマスクです。
※BFE (バクテリア濾過効率) 99%以上:ネルソン研究所
- ・撥水性能を持ったスパンボンド素材を使用しているため、心地よい装着感を実現しています。
- ・最長クラス約12cmのノーズブリッジは樹脂製で完全焼却でき、環境にもやさしいマスクです。

<アーチ入りマスク>

- ・マスク中央のアーチ型プレートにより、マスク面と口の間に空間を作り、息苦しさを軽減します。
- ・顔への圧迫感が少なく、会話がラクにできます。
- ・マスク面と口の空間が口紅の付着を防止し、装着時の不快感を少なくします。
- ・アーチ型プレートにより頬との密着性が高くなり、隙間ができにくい構造です。
- ・プラスチック製ノーズブリッジを使用していますので、完全焼却でき、環境にもやさしいマスクです。
- ・高性能フィルター入りです。

※BFE (バクテリア濾過効率) 99%以上:日本化学繊維検査協会

<アーチ入りピンクマスク>

- ・アーチ入りピンクマスクは女性用で、眼に優しい柔らかなピンク色でサイズも女性向けに小さめです。
- ・メイクがマスクに付着しにくいです。
- ・ゴムタイプのみとなります。



アーチ入りマスク、ゴム



アーチ入りピンクマスク、ゴム



アーチ入りマスク、紐

商品名	規格	ケース入数
サージカルマスク エルガード	エルガード(50マ)イ	50枚×20箱(1,000枚)
サージカルマスク、紐	ESM-1(50マ)イ	50枚×40箱(2,000枚)
サージカルマスク、ゴム	ESM-2(50マ)イ	50枚×40箱(2,000枚)
シールド付サージカルマスク、紐	ESS-1(25マ)イ	25枚×8箱×2内ケース(400枚)
シールド付サージカルマスク、ゴム	ESS-2(25マ)イ	25枚×8箱×2内ケース(400枚)
アーチ入りマスク、ゴム	EPS-01(50マ)イ	50枚×40箱(2,000枚)
アーチ入りマスク、紐	EPS-02(50マ)イ	50枚×40箱(2,000枚)
アーチ入りピンクマスク、ゴム	EPS-03(PINK 50マ)イ	50枚×40箱(2,000枚)

N-95 マスク

N-95とは、NIOSH（米国安全衛生研究所）が、米国CDC（Centers for Disease Control and Prevention:疾病管理予防センター）のガイドライン（1994年）に基づき定めた規格です。

「N」は（Not resistant to oilの略）耐油性無しグレードを指し、「95」は、固形塩化ナトリウムエアロゾル（平均粒径:0.075ミクロン）で少なくとも約95%以上の捕集効率が求められます。顔面にフィットする機能を有する微粒子用マスクです。



● 特徴 ●

<抗ウイルスマスク バリエールN95> 販売終了

- ・ウイルス対策エージェンツ「Br-p3」を塗布した不織布を使用しています。
- ・5層構造です。
- ・先端部に折り込みがあり、広い濾過面積を有するため、高捕集効率と高通気性を備えています。（従来品に比べて呼吸がラクです。）
- ・軽量で折りたたみ式なので、装着時や持ち運び時の負担を軽減します。
- ・1枚ずつ個包装しています。



抗ウイルスマスク バリエールN95



微粒子マスク N95レギュラー



微粒子マスク N95スモール

商品名	規格	ケース入数
抗ウイルスマスク	バリエールN95(20マイ)	20枚×32箱 (640枚)
微粒子マスク (カップ型)	N95レギュラー(20マイ)	20枚×12箱 (240枚)
微粒子マスク (カップ型)	N95スモール(20マイ)	20枚×12箱 (240枚)
微粒子マスク (折りたたみ型)	N95オリタタミ (30マイ)	30枚×20箱 (600枚)

販売終了



ドクターキャップP ESD-P



● 特徴 ●

柔らかく、通気性の良いспанレース不織布を使用した高品質のドクターキャップです。

額の部分に吸水パッドを取り付けたタイプは長時間の着用でも汗を吸収して快適です。



ドクターキャップ EDC

ドクターキャップ / サージカルキャップ

商品名	規格	ケース入数
ドクターキャップ	EDC(100㍑)	100枚×5箱×2内ケース(1,000枚)
ドクターキャップ	ESD(100㍑)	100枚×4箱×2内ケース(800枚)
ドクターキャップL	ESD-L(100㍑)	100枚×4箱×2内ケース(800枚)
ドクターキャップP	ESD-P(50㍑)	50枚×8箱(400枚)
ドクターキャップPL	ESD-PL(50㍑)	50枚×8箱(400枚)
汎用キャップ	EHC(100㍑)	100枚×5箱×2内ケース(1,000枚)
サージカルキャップ	ESC(100㍑)	100枚×5箱×2内ケース(1,000枚)
Kキャップ	EKC(100㍑)	100枚×5箱×2内ケース(1,000枚)



サージカルキャップ ESC

ナースキャップ

商品名	規格	ケース入数
ナースキャップ	ENC-B(100㍑)	100枚×5箱×2内ケース(1,000枚)
ナースキャップ	ENC-G(100㍑)	100枚×5箱×2内ケース(1,000枚)
ナースキャップ	ENC-P(100㍑)	100枚×5箱×2内ケース(1,000枚)
ナースキャップ	ENC-W(100㍑)	100枚×5箱×2内ケース(1,000枚)



Kキャップ EKC

ナースキャップ



ブルー

グリーン

ピンク

ホワイト

シューズカバー

底部に滑り止め加工を施しています。

CPタイプは、下部には撥水性、上部には通気性の良い異なった素材を組み合わせています。



商品名	規格	ケース入数
シューズカバー-S	SC-S(100マ)	100枚×3内ケース(300枚)
シューズカバー-L	SC-L(50マ)	50枚×3内ケース(150枚)
シューズカバー-CP	SC-CP(50マ)	50枚×3内ケース(150枚)

オイフテープ

吸水性の不織布が素材のオイフテープです。
ドレープと術野の固定、チューブやコード類の固定用に使用できます。



商品名	規格	ケース入数
オイフテープ	EOT-820-2	(2枚/滅菌袋)×100袋
オイフテープ	EOT-820-4	(4枚/滅菌袋)×50袋
オイフテープ	EOT-840-4	(4枚/滅菌袋)×25袋

アームカバー



手首から上腕部までガウンの上からしっかりと覆うことができる、撥水のアームカバーです。

商品名	規格	ケース入数
アームカバー	EAC-01	(1枚/滅菌袋)×100袋
アームカバー	EAC-02	(2枚/滅菌袋)×50袋

器械台カバー(不織布タイプ)



全面吸水 / 防水タイプの器械台カバーです。
仮固定用テープ付です。

商品名	規格	ケース入数
器械台カバー	HMKC-1215	25枚×2内ケース(50枚)
器械台カバー	HMKC-1518	20枚×2内ケース(40枚)

器械台カバー(フィルムタイプ)



PEフィルム製に吸水性の良い不織布で補強した器械台カバーです。仮固定テープ付です。

商品名	規格	ケース入数
器械台カバー	PMKC-1215	25枚×2内ケース(50枚)
器械台カバー	PMKC-1518	20枚×2内ケース(40枚)
器械台カバー	PMKC-1524	20枚×2内ケース(40枚)

メイヨスタンドカバー



メイヨスタンドを無菌的に覆うカバーです。
PEフィルム製でメイヨ盤部分は不織布で補強しています。

商品名	規格	ケース入数
メイヨスタンドカバー	PMC-60135	50枚×2内ケース(100枚)
メイヨスタンドカバー	FMC-45120	50枚×2内ケース(100枚)

ドレープ

EL-CLOTH (エルクロス) ドレープの特徴

手術用ドレープの使用目的で最も重要なこととして、患者様の未消毒部位や周辺環境から手術野を分離し、手術時の感染を防止する目的が挙げられます。そのためには、手術用ドレープに使用される原反バリアー性は極めて重要となります。

細菌やウイルスは、液体の浸透と同時に通過すると考えられますので、手術用ドレープに使用する素材は血液などの液体の浸透に耐える素材でなければなりません。

また、実際の使用では圧力が加わることが多いので、圧力が加わった条件での液体に対するバリアー性を評価する必要があります。

● ドレープDMDタイプ (吸水/防水/吸水)

柔らかく吸水性の良いスパンレース不織布
ピンホールチェックされたポリエチレンフィルム
吸水性のスパンボンド不織布




● ドレープHMDタイプ (吸水/防水)

柔らかく吸水性の良いスパンレース不織布
ピンホールチェックされたポリエチレンフィルム



● ドレープFMDタイプ (撥水/防水/撥水)

撥水スパンボンド不織布
ピンホールチェックされたポリエチレンフィルム
撥水スパンボンド不織布

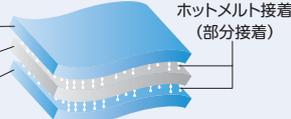

弊社の手術用ドレープは非常に高い液体防御性を有しています。

ドレープFMD (撥水ドレープ)、ドレープHMD (吸水ドレープ)、ドレープDMD (両面吸水ドレープ) は、不織布と成形されたPEフィルムを薄いホットメルトで貼り合わせる弊社独自の製法により、吸水性が良く (HMD、DMD)、大変柔らかなドレープです。手術用ドレープでは、使用の快適性と共に血液や体液の浸透を防ぐ高いバリアー性が要求されます。

ドレープFMD (撥水ドレープ)、ドレープHMD (吸水ドレープ)、ドレープDMD (両面吸水ドレープ) は、全てAAMI規格レベル4に該当しており、血液やウイルスの浸透に対する高い抵抗性を有したドレープです。

● ANSI/AAMI (米国規格協会/米国医療器具振興協会) PB70による性能分類


レベル	試験方法	試験方法	要求値
1	衝撃透過性 (スプレーインパクト法)	AATCC42:2000	≤4.5g
2	衝撃透過性 (スプレーインパクト法)	AATCC42:2000	≤1.0g
	耐水性	AATCC127:1998	≥200mm
3	衝撃透過性 (スプレーインパクト法)	AATCC42:2000	≤1.0g
	耐水性	AATCC127:1998	≥500mm
4	人工血液による浸透に対する抵抗性の試験方法	ASTMF 1670:2003 対ドレープ	合格
	Phi-X174ウイルスによる血液媒介性病原体の浸透に対する抵抗性の試験方法	ASTMF 1670:2003 対ガウン	合格



[DMD シリーズ]

● 特徴 ●

吸水不織布/PEフィルム (防水) /吸水不織布の三層構造の両面吸水ドレープです。中間層にPE (防水) フィルムを特殊加工しており、吸収した血液が裏面に浸透することはありません。また、裏面も吸水性の不織布なので、汗を吸収し、患者様に不快感を与えることもありません。高吸水性で非常に柔らかく、厚み・強度ともに優れた両面吸水ドレープです。

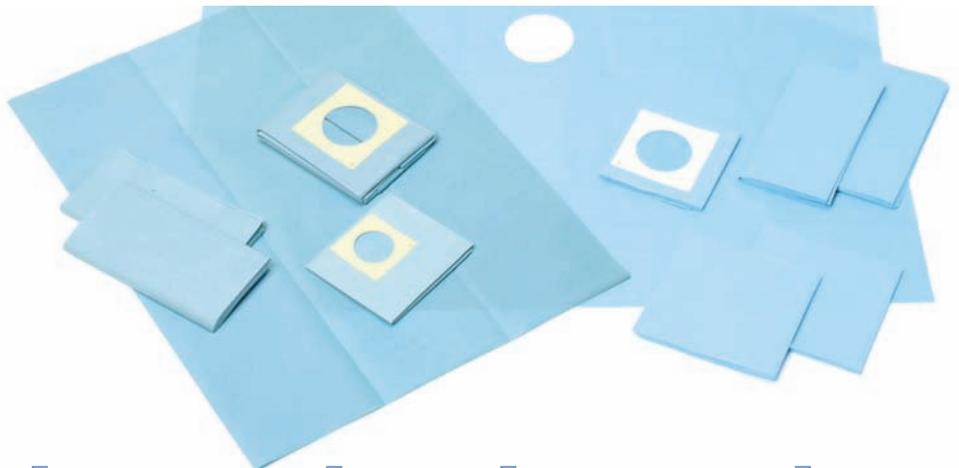

[HMD シリーズ]

● 特徴 ●

吸水性の良いスパンレース不織布と成形されたPEフィルムを薄いホットメルトで貼り合わせた素材です。高吸水性で非常に柔らかく、かつ完全防水の優れた吸水ドレープです。


[FMD シリーズ]

● 特徴 ●


撥水不織布/PEフィルム (防水) /撥水不織布の三層構造により、完全防水で長時間の手術や、圧力のかかった場合でも裏側に浸透することがなく、汚染域を広げません。また、発塵がほとんどなく、強度の高い優れた撥水ドレープです。

全身ドレープ

アッペ用ドレープ (HMDタイプ)

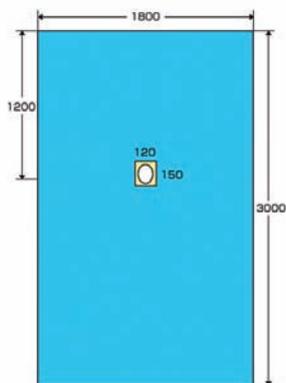


アッペ用ドレープ
規格/HMD1830N1215T
ケース入数/10枚x2箱(20枚)

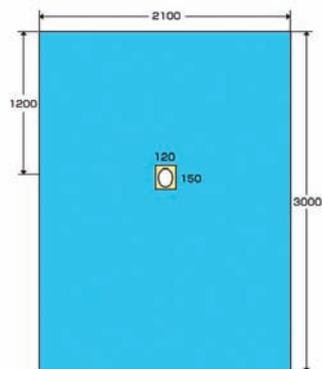


アッペ用ドレープ
規格/HMD2130N1215T
ケース入数/10枚x2箱(20枚)


外科用開腹ドレープ (FMDタイプ)

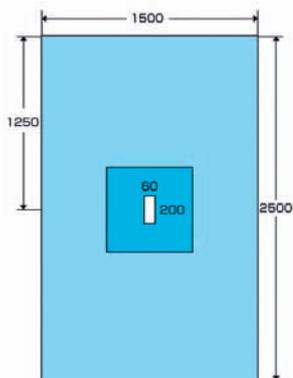


外科用開腹ドレープ
規格/FMD1525S620
ケース入数/5枚x2箱(10枚)

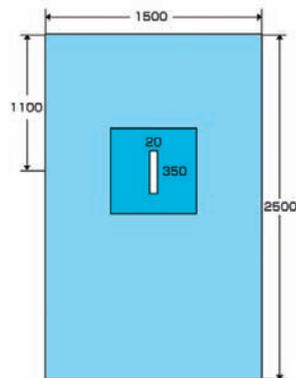


外科用開腹ドレープ
規格/FMD1525S235-2
ケース入数/5枚x2箱(10枚)

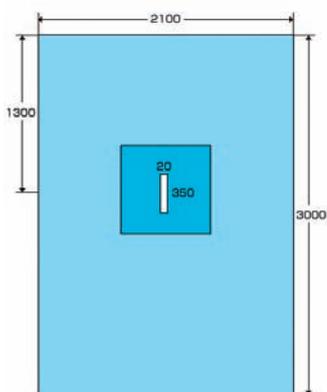


外科用開腹ドレープ
規格/FMD2130S235-2
ケース入数/5枚x2箱(10枚)

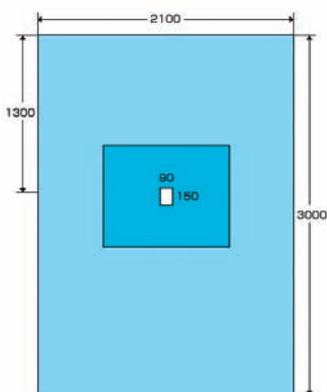

外科用開腹ドレープ
規格/FMD2130S915
ケース入数/5枚x2箱(10枚)

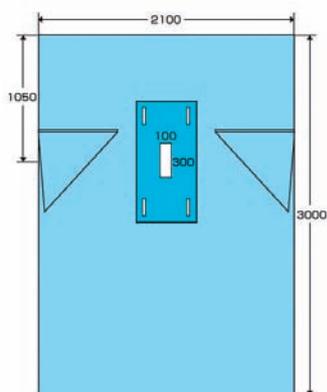


外科用開腹ドレープ
規格/FMDW2130S1030T4-2
ケース入数/5枚x2箱(10枚)

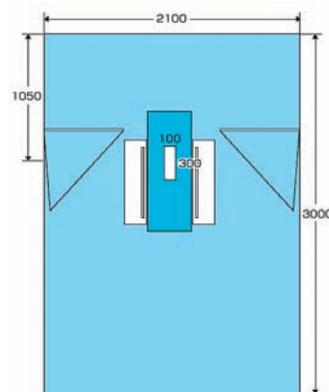


外科用開腹ドレープ
規格/FMDW2130S1030T4P-2
ケース入数/5枚x2箱(10枚)

外科用開胸ドレープ (FMDタイプ)


心臓外科用ドレープ (FMDタイプ)

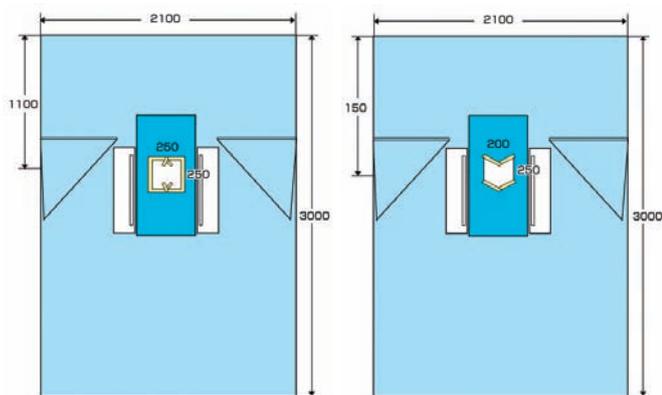


外科用開胸ドレープ
規格/FMDW2130S2525TP
ケース入数/5枚x2箱(10枚)

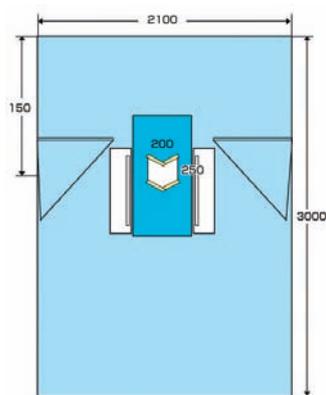

外科用開胸ドレープ
規格/FMDW2130VT2P
ケース入数/5枚x2箱(10枚)

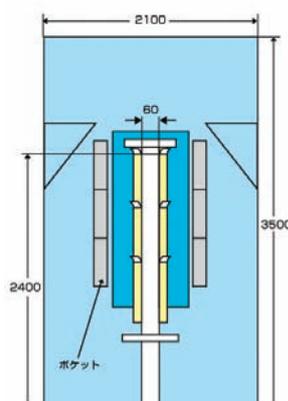


心臓外科用ドレープ
規格/FMDW2135U6240T4P
ケース入数/5枚x2箱(10枚)

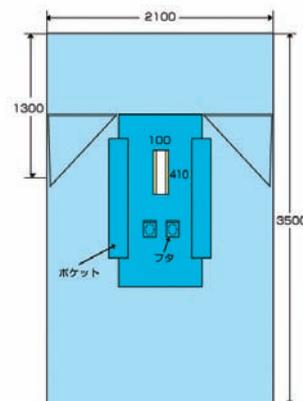


心臓外科用ドレープ
規格/FMDW2135S1041E2P
ケース入数/5枚x2箱(10枚)


脳外科用ドレープ (FMDタイプ)

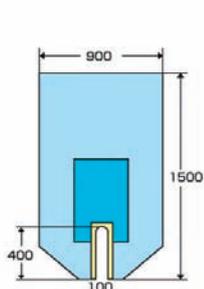


脳外科用ドレープ
規格/FMD915U1040T
ケース入数/10枚x2箱(20枚)

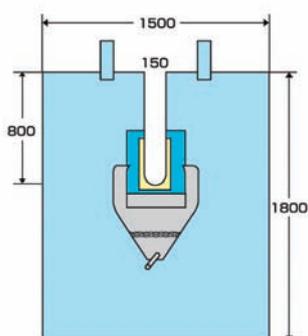

脳外科用ドレープ
規格/FMD1518U1580TBT
ケース入数/5枚x2箱(10枚)

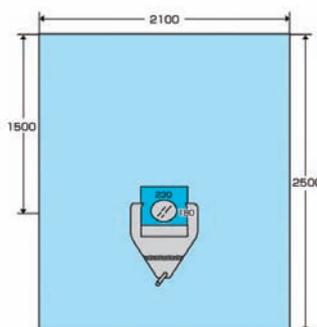


脳外科用ドレープ
規格/FMD2125E1823FB
ケース入数/5枚x2箱(10枚)

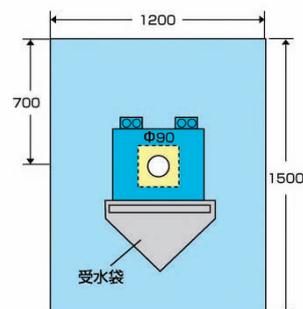


脳外科用ドレープ
規格/FMD1215C9TP
ケース入数/10枚x2箱(20枚)


伸縮円穴ドレープ (FMDタイプ)

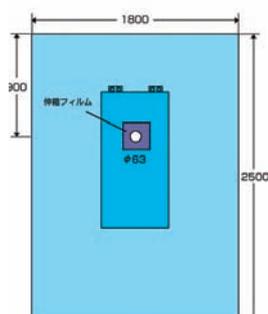


伸縮円穴ドレープ
規格/FMD1825EA060
ケース入数/5枚x2箱(10枚)

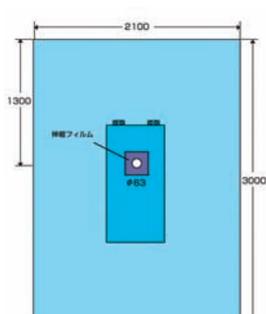


伸縮円穴ドレープ
規格/FMD2130EA060
ケース入数/5枚x2箱(10枚)

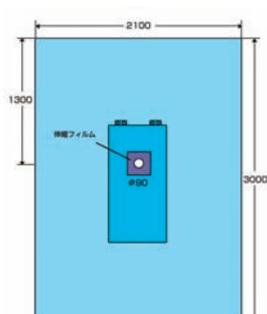

伸縮円穴ドレープ
規格/FMD2130EA090
ケース入数/5枚x2箱(10枚)

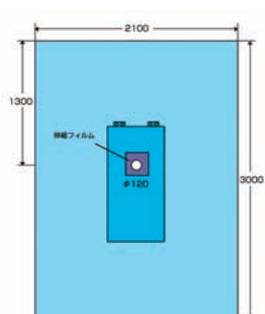


伸縮円穴ドレープ
規格/FMD2130EA120
ケース入数/5枚x2箱(10枚)

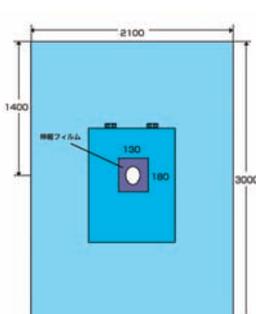


伸縮円穴ドレープ
規格/FMD2130EN1318
ケース入数/5枚x2箱(10枚)

関節鏡用ドレープ (FMDタイプ)

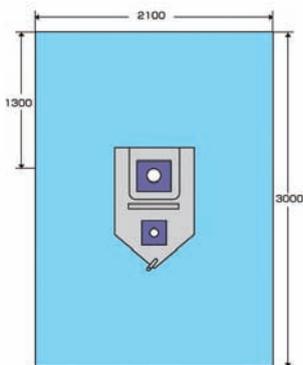


関節鏡用ドレープ
規格/FMD2130EH2B
ケース入数/5枚x2箱(10枚)

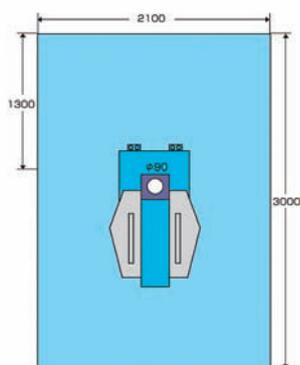


関節鏡用ドレープ
規格/FMD2130EA090B2
ケース入数/5枚x2箱(10枚)

CHS用ドレープ (FMDタイプ)

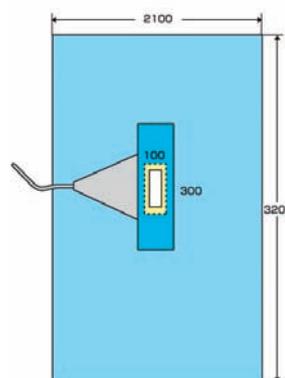


CHS用ドレープ
規格/FMD2132S1030TB
ケース入数/5枚x2箱(10枚)


U型ドレープ (FMDタイプ)

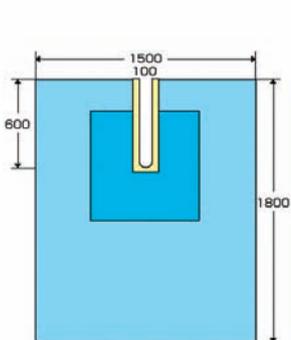


U型ドレープ
規格/FMD1518U1060T
ケース入数/5枚x2箱(10枚)

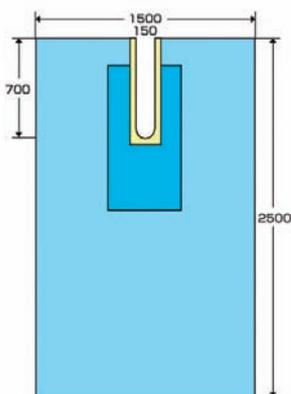

U型ドレープ
規格/FMD1525U1570T
ケース入数/5枚x2箱(10枚)

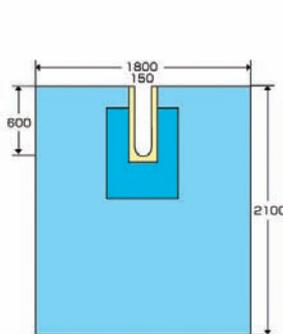


U型ドレープ
規格/FMD1821U1560T
ケース入数/5枚x2箱(10枚)

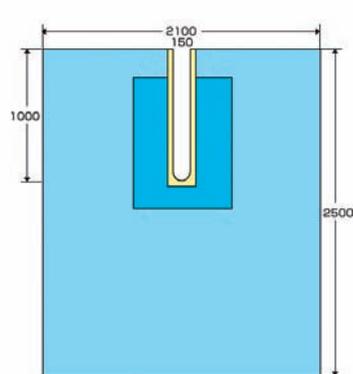


U型ドレープ
規格/FMD2125U15100T
ケース入数/5枚x2箱(10枚)

ラパコレ用ドレープ (FMDタイプ)

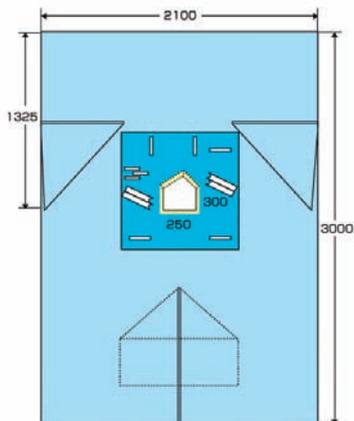


ラパコレ用ドレープ
規格/FMDW2130DT-1
ケース入数/5枚x2箱(10枚)

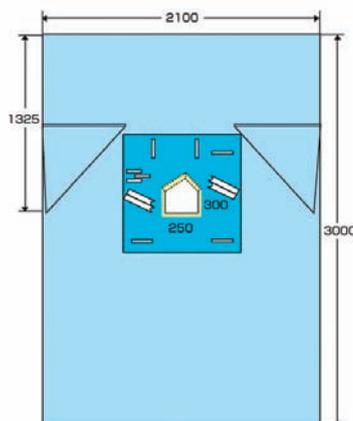


ラパコレ用ドレープ
規格/FMDW2130DT-2
ケース入数/5枚x2箱(10枚)


婦人科用ドレープ (FMDタイプ)

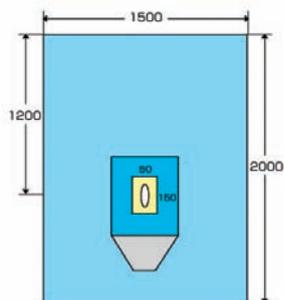

婦人科用ドレープ
規格/FMD1520N515TB
ケース入数/10枚x2箱(20枚)

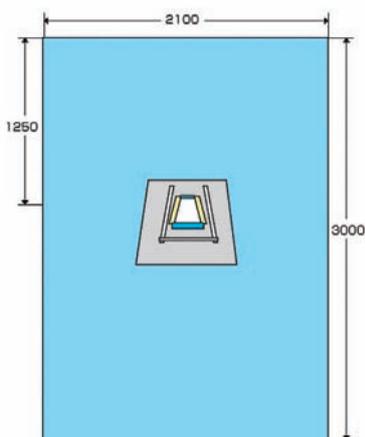


婦人科用ドレープ
規格/FMD2130DTP3
ケース入数/5枚x2箱(10枚)

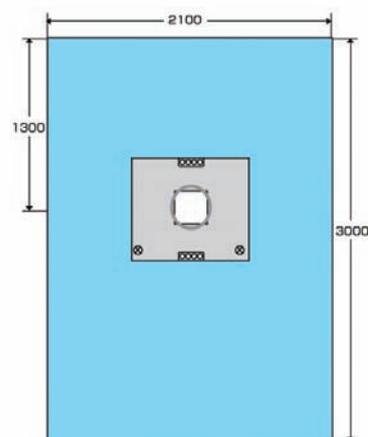


婦人科用ドレープ
規格/FMD2130A25FPC
ケース入数/5枚x2箱(10枚)

泌尿器科用ドレープ (FMDタイプ)

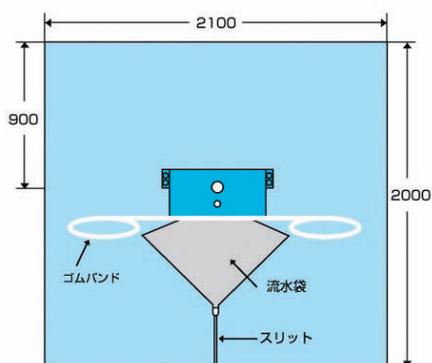


泌尿器科用ドレープ
規格/FMD2120A5BS
ケース入数/5枚x2箱(10枚)

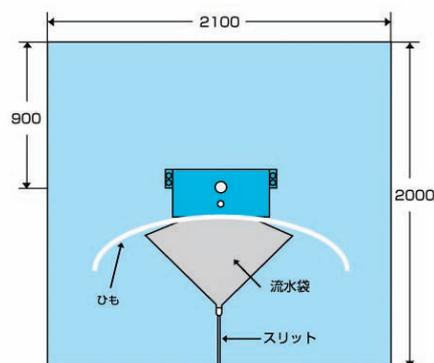


泌尿器科用ドレープ
規格/FMD2120A5BS-2
ケース入数/5枚x2箱(10枚)

カテ検査用ドレープ (HMDタイプ)

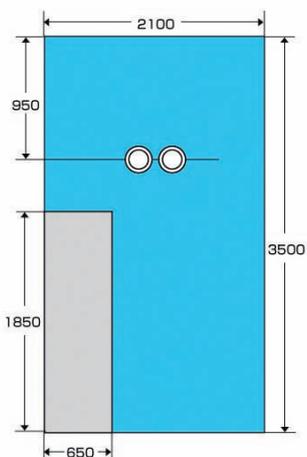

カテ検査用ドレープ
規格/HMD2135CH2TK
ケース入数/10枚x2箱(20枚)

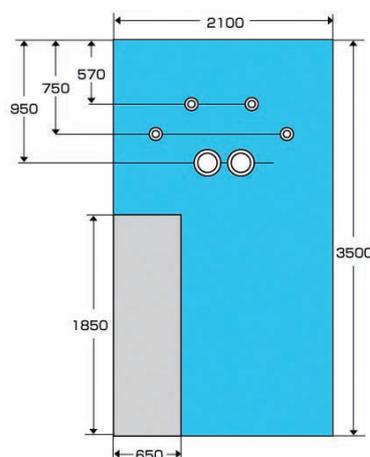

カテ検査用ドレープ
規格/HMD2135CH6TK
ケース入数/10枚x2箱(20枚)

眼科用ドレープ

[RMDタイプ]

● 特徴 ●

眼科分野での、処置、手術に最適な眼科用ドレープです。基本布材にパルプスパンレース不織布を使用し、高いバリア性・柔軟なドレープ性・優れた撥水性を備えています。

優れたバリア性

細かい分枝を持つパルプとポリエステル繊維が、非常にきめこまかく絡み合っており、貫通孔がないので、優れたバクテリアバリア性を備えています。

優れた撥水性

撥水加工処理を施していますので、血液、体液、薬液等の浸透を防ぎます。

※吸水性ドレープとは異なりますのでご注意ください。



優れた快適性

綿布を超えたソフト感、ドレープ性、綿布に近い通気性など、長時間使用にも最適です。

用途に合わせたラインナップ


受水袋、呼吸緩和用アルミバー、フィルムドレープ付など、用途に適した機能と豊富なサイズを取り揃えています。




眼科用ドレープ

商品名	規格	ケース入数
眼科用ドレープ	RMD-99N35T	30枚×2箱(60枚)
眼科用ドレープ	RMD-99N58T	30枚×2箱(60枚)
眼科用ドレープ	RMD-1212N58T	30枚×2箱(60枚)
眼科用ドレープ	RMD-99N58F	30枚×2箱(60枚)
眼科用ドレープ	RMD-1212N58F	30枚×2箱(60枚)
眼科用ドレープ	RMD-99A55TA	30枚×2箱(60枚)
眼科用ドレープ	RMD-99N35TP-1	30枚×2箱(60枚)
眼科用ドレープ	RMD-1212N35TP-1	30枚×2箱(60枚)
眼科用ドレープ	RMD-99N35TP-2	30枚×2箱(60枚)
眼科用ドレープ	RMD-99N35FP-2	30枚×2箱(60枚)
眼科用ドレープ	RMD-99N35TP-2B	30枚×2箱(60枚)
眼科用ドレープ	RMD-1212N35TP-2B	30枚×2箱(60枚)
眼科用ドレープ	RMD-1215N35TAL	25枚×2箱(50枚)
眼科用ドレープ	RMD-1215N58TAL	25枚×2箱(50枚)


眼科用ドレープ (RMDタイプ)

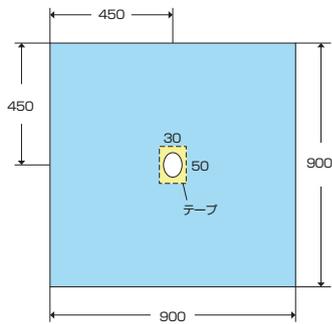


眼科用ドレープ
規格/RMD-99N35T
ケース入数/30枚×2箱

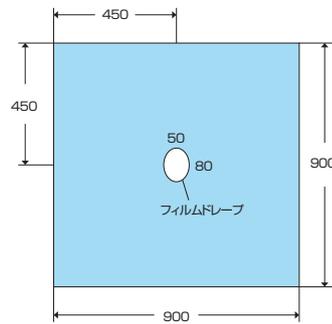


眼科用ドレープ
規格/RMD-99N58F
ケース入数/30枚×2箱

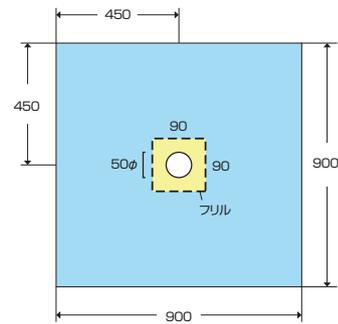


眼科用ドレープ
規格/RMD-99N55TA
ケース入数/30枚×2箱

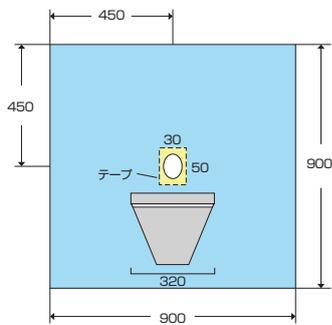


眼科用ドレープ
規格/RMD-99N35TP-1
ケース入数/30枚×2箱

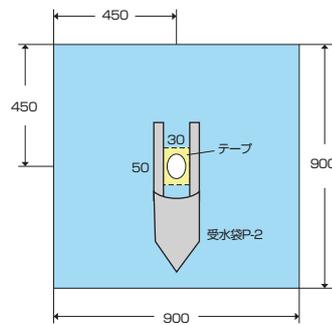


眼科用ドレープ
規格/RMD-99N35TP-2
ケース入数/30枚×2箱

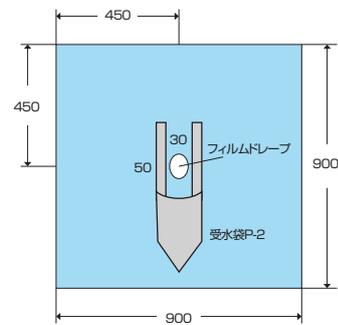

眼科用ドレープ
規格/規格/RMD-99N35FP-2
ケース入数/30枚×2箱

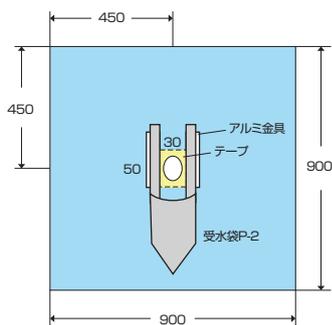


眼科用ドレープ
規格/規格/RMD-99N35TP-2B
ケース入数/30枚×2箱

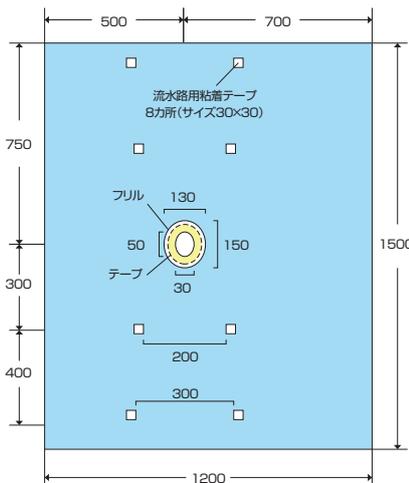


眼科用ドレープ
規格/RMD-1215N35TAL
ケース入数/25枚×2箱

受水袋

P-1タイプ

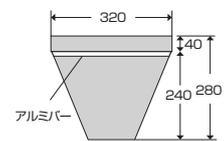

P-2タイプ

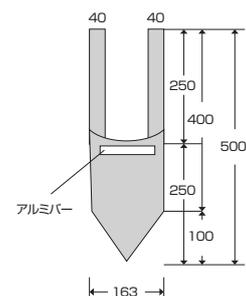

その他

アイソレーションガウン

前面と袖部分に PE ラミを施したバリアー性の高いアイソレーションガウンです。背中部分は通気がありますので、長時間の着用でも蒸れが少なく快適です。

袖口がゴムタイプとニットタイプの2種類を取り揃えています。

商品名	規格	ケース入数
ELKアイソレーションガウン	EIG-Y1(イロ)	50枚×2箱(100枚)
ELKアイソレーションガウン	EIG-P1(ピョ)	50枚×2箱(100枚)
ELKアイソレーションガウン	EIG-B1(ブル)	50枚×2箱(100枚)
ELKアイソレーションガウン	EIG-G1(グリ)	50枚×2箱(100枚)
ELKアイソレーションガウン	EIG-Y2(イロ)	50枚×2箱(100枚)
ELKアイソレーションガウン	EIG-P2(ピョ)	50枚×2箱(100枚)
ELKアイソレーションガウン	EIG-B2(ブル)	50枚×2箱(100枚)
ELKアイソレーションガウン	EIG-G2(グリ)	50枚×2箱(100枚)
アイソレーションガウン PEラミ	EIG-B2PE(ブル)	10枚×10袋(100枚)
滅菌アイソレーションガウン PEラミ	EIGS-B2PE(ブル)	(1枚/滅菌袋)×100袋



ELKアイソレーションガウン
(カラー:ブルー)

アイソレーションガウン
PEラミ



袖付PEガウン



袖付PEガウン 半袖タイプ

袖付PEガウン

完全防水タイプのフィルム製のPEガウンです。

商品名	規格	ケース入数
袖付PEガウン	PEG	50枚×4箱(200枚)
袖付PEガウン 半袖タイプ	PEG-H	50枚×4箱(200枚)

ソフトPEエプロン

ポリエチレン素材にエンボス加工を施してあるエプロンです。
使用後は首の後ろの切れ込みより破って、簡単に廃棄できます。

商品名	規格	ケース入数
ソフトPEエプロン	SPE	100枚×6箱 (600枚)



ソフトPEエプロン

ディスポシート・滅菌シート



吸水性のレーヨン不織布にラミネート加工した吸水 / 防水の医療用のシートです。

病棟ベッド・診察台・透析等、様々な用途にご使用できます。

商品名	規格	ケース入数
ディスポシート	EC4-3050	100枚×10袋 (1,000枚)
ディスポシート	EC4-5060	50枚×10袋 (500枚)
ディスポシート	EC4-1012	10枚×10袋 (100枚)
ディスポシート	EC4-1015	10枚×5袋 (50枚)
ディスポシート	EC4-1018	10枚×5袋 (50枚)
ディスポシート	EC4-1020	10枚×5袋 (50枚)

商品名	規格	ケース入数
滅菌シート	EC4S-1012	(1枚/滅菌袋) ×100袋
滅菌シート	EC4S-1015	(1枚/滅菌袋) ×50袋
滅菌シート	EC4S-1018	(1枚/滅菌袋) ×50袋
滅菌シート	EC4S-1020	(1枚/滅菌袋) ×50袋

ロールシート

吸水性のレーヨン不織布にラミネート加工した吸水/防水の医療用のロールシートです。
600mm・800mm・900mm・1000mm・1200mm 幅のロールシートを取り揃えておりますので、用途に合わせてお選びいただけます。



商品名	規格	ケース入数
ロールシート	ER4W12-50M	4本
ロールシート	ER4W10-100M	4本
ロールシート	ER4W9-100M	4本
ロールシート	ER4W8-50M	6本
ロールシート	ER4W6-50M	4本

■ご注文・お問い合わせ先

Canon

キヤノンメディテックサプライ株式会社

<https://mts.medical.canon>

本 社 〒211-0067 神奈川県川崎市中原区今井上町9番1号

カタログご利用についてのお願い

・掲載しました商品は平成22年12月現在のものです。
カタログ掲載の商品は、予告なしに改良、仕様の変更を行う場合もありますので
ご了承ください。
・個々の製品の特長、仕様などは簡略化しております。
詳細は単品カタログをご覧ください。

・現品とカタログ上の商品の色は、印刷インクの都合上、実際の商品と多少異なる場
合がございます。あらかじめご了承ください。
・商品をご使用の際には、取扱説明書・注意事項等を熟読の上ご使用ください。