

エルク滅菌バッグシリーズ

ERシリーズ ERシリーズは、エルク滅菌バッグに使用している用紙は、英国保健省規格に準じて特殊抄造された滅菌紙を採用しています。
※英国保健省規格：No.TSS/S3330006

ER (ロールタイプ)

長尺物から幅広の被滅菌物まで、さまざまな形や大きさに対応できる豊富なバリエーションがあります。



商品番号	サイズ	商品番号	サイズ
ER-050EN	50mm×200m巻	ER-200EN	200mm×200m巻
ER-070EN	70mm×200m巻	ER-230EN	230mm×100m巻
ER-085EN	85mm×200m巻	ER-250EN	250mm×100m巻
ER-100EN	100mm×200m巻	ER-300EN	300mm×100m巻
ER-130EN	130mm×200m巻	ER-320EN	320mm×100m巻
ER-150EN	150mm×200m巻	ER-350EN	350mm×100m巻
ER-180EN	180mm×200m巻	ER-400EN	400mm×100m巻

ERG (ガゼットタイプ) ヒダ付き

ヒダ付きで、被滅菌物の出し入れが容易にできますので、厚みのある物などの滅菌に最適です。



商品番号	サイズ	商品番号	サイズ
ERG-100EN	100mm×50mm×100m	ERG-150EN	150mm×50mm×100m
ERG-200EN	200mm×70mm×100m	ERG-250EN	250mm×70mm×100m
ERG-300EN	300mm×80mm×100m	ERG-350EN	350mm×80mm×100m

EP (パウチタイプ) 山型シール

三周辺がヒートシールされ、袋状になっているため、被滅菌物を直ちに挿入できます。



商品番号	サイズ	商品番号	サイズ
EP-0815	80×150mm	EP-1035	100×350mm
EP-0820	80×200mm	EP-1535	150×350mm
EP-0828	80×280mm	EP-2028	200×280mm
EP-1020	100×200mm	EP-2548	250×480mm
EP-1028	100×280mm		

CRシリーズ CRシリーズは、各国規格に準拠した製品です。
※EN868-3, EN868-5 規格および ISO11607-1 (JIS T 0841-1) に準拠

CR (ロールタイプ)

長尺物から幅広の被滅菌物まで、さまざまな形や大きさに対応できる豊富なバリエーションがあります。ロールタイプのため、被滅菌物の長さに合わせて自由にカットして使用できます。



商品コード	規格	サイズ	備考
30815501	CR-050EN	50mm×200m	12巻/箱
30815502	CR-075EN	75mm×200m	10巻/箱
30815503	CR-100EN	100mm×200m	8巻/箱
30815504	CR-150EN	150mm×200m	4巻/箱
30815505	CR-200EN	200mm×200m	4巻/箱
30815506	CR-250EN	250mm×200m	4巻/箱
30815507	CR-300EN	300mm×200m	2巻/箱
30815508	CR-350EN	350mm×200m	2巻/箱
30815509	CR-400EN	400mm×200m	2巻/箱

CRG (ガゼットロールタイプ)

ヒダ付きなので、被滅菌物の出し入れが容易にでき、厚みのある物などの滅菌に最適です。立体的な被滅菌物をCRタイプより少ない幅で収納でき、省コストになります。



商品コード	規格	サイズ	備考
30815603	CRG-100EN	100mm×40mm×100m	8巻/箱
30815604	CRG-150EN	150mm×50mm×100m	4巻/箱
30815605	CRG-200EN	200mm×55mm×100m	4巻/箱
30815606	CRG-250EN	250mm×60mm×100m	4巻/箱
30815607	CRG-300EN	300mm×70mm×100m	2巻/箱
30815608	CRG-350EN	350mm×80mm×100m	2巻/箱

メッキンラッパー EL-CLOTH

SMMS 不織布を使用!

(スパンボンド+メルトブロー+メルトブロー+スパンボンド)

強度に優れ、通気性とバリア性をバランスよく備えた、鮮やかなブルーのメッキンラッパーです。

■過酸化水素ガス(プラズマ)滅菌にも対応しています。

商品名	規格	ケース入数
メッキンラッパー	600×600mm EW-0606	100枚×2袋(200枚)
メッキンラッパー	900×900mm EW-0909	25枚×4袋(100枚)
メッキンラッパー	1200×1200mm EW-1212	25枚×2袋(50枚)
メッキンラッパー	1500×1500mm EW-1515	25枚×2袋(50枚)

⚠ 安全に関するご注意

- ご使用前に「取り扱い説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 電源は、交流100V、10A以上の電気配線に接続ください。
- 滅菌バッグの挿入口や、搬送ベルトの間隔に指などを挟まないように注意して下さい。
- 紙/プラスチックラミネート及び、タイベックを使用した滅菌バッグ専用のシーラーです。純粋なポリエチレン、PVC、ポリアミド、ポリプロピレン等の素材には適していません。

●ご注文・お問い合わせは下記へどうぞ

Canon

キヤノンメドテックサプライ株式会社

<https://mts.medical.canon>

本社 〒211-0067 神奈川県川崎市中原区今井上町9番1号

輸入元

株式会社 ニチオン 千葉県船橋市栄町2-12-4

滅菌バッグ専用メディカルシーラー
hawa
hm850DC-V
国際標準規格に準拠した
新世代型メディカルシーラー




滅菌バッグのシーリングを確実に処理して安心と信頼をお届けします

滅菌バッグ専用メディカルシーラー

hawa
hm850DC-V

シーリング工程のバリデーションは、医療器材を使用するまでの滅菌保証と品質の標準化においてきわめて重要です。hm850DC-Vは、ドイツhawa社で開発されたバリデーション機能を搭載した新世代型の画期的なシーラーです。滅菌バッグのシーリングに必要なパラメーター(温度・圧力・時間)をマイクロプロセッサーで制御することにより、ご使用の滅菌バッグを最適な数値で、シーリング処理します。また、別売のUSBストレージユニットを使用することにより、毎回のシール圧力や、シール温度等を記録することができます。

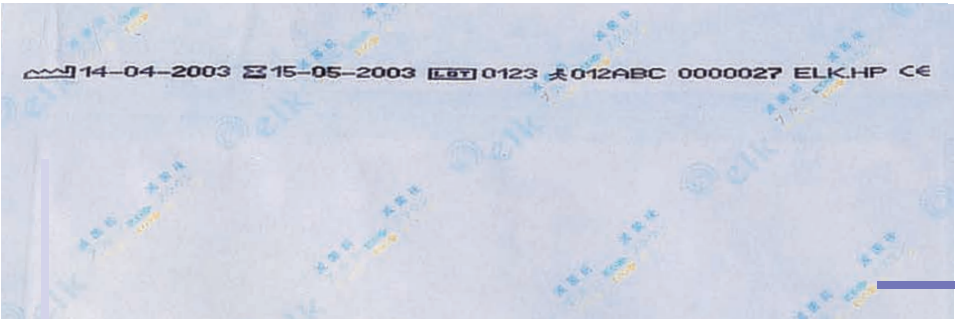

多様な印字機能

- 必要な情報をシーリングと同時に紙面に印字することができます。
*シーリング日、有効期限以外は数字以外にアルファベット入力も可能です。
- 文字サイズ、文字の向き、文字幅、印字開始位置、印字内容等の設定を自由に変更できます。
- 印字する項目は、ピクトグラム表示又は文字表示の切り換えができます。

印 字 項 目			
 DAT.	シール年月日 シーリング処理した日付。	 EXR.	有 効 期 限 シーリング処理した日から3種類の設定が可能です。 ①1ヵ月後の年月日 ②3ヵ月後の年月日 ③6ヵ月後の年月日
 LOT CHARGE	ロットナンバー シーリング作業を管理する場合に使用。滅菌物の回収などには非常に有効です。	 テキスト	20文字のアルファベット、又は、数字を組み合わせて部署名等を印字します。滅菌物の管理がより明確になります。
 PERS.	個人ナンバー 20文字のアルファベットで、氏名又は、IDナンバーを記入し、シーリング作業者を明確にします。	 1,2,3. COUNT	個 数 番 号 滅菌バッグ1個ずつに連番を付けて印字します。
 CE	CEマーク ヨーロッパ基準に準じた表記を印字します。		

滅菌バッグ専用メディカルシーラー

hawa
hm850DC-V

国際標準規格に準拠したバリデーション機能

- シールに必要なパラメーターを監視し、シーリングを一定値で行います。設定値を外れた場合には、自動停止する機能を搭載しています。
- シールチェック機構によりシーリングパラメータチェックを作業工程前に確認できます。出力項目は、日付・時間・温度・接着圧力・シール時間・名前が印字されますので、記録を残す事が可能です。
なお、別売アクセサリーのデイリーシールチェックシートとの組み合わせにより、シーリング状態を的確に目視検査できます。
*ISO11140-1WG7により滅菌バッグのシーリングに対する国際標準化が進められています。

主 な 仕 様

適用滅菌バッグ：幅 無制限、長さ150mm以上の紙/プラスチックラミネートタイプ及び タイベックを使用した滅菌バッグ。	印 字 開 始 位 置：1～99まで任意調整可能
シ ー ル 速 度：約10m/分	騒 音：47dB
シ ー ル 幅：12mm	電 源：AC100V 50/60Hz
シ ー ル 温 度：80℃～220℃	消 費 電 力：500VA
温 度 制 御：マイクロプロセッサー(温度誤差±1%以下)	外 形 寸 法：620(幅)×260(奥行き)×250(高さ)
印 字 機 能：カット部からシール部までの余白寸法:5～30まで任意調整可能。シール年月日、有効期限、ロット番号、個人番号、テキスト、CEマークを印字(印字の選択可能)	重 量：23kg
	適 合 規 格：DIN 58953-7、ISO 9001:2000、NE 980、CE
	製 造 元：hawa GmbH (Germany)
	別 売 付 属 品：デイリーシールチェックシート 74×180 250枚/1箱 ローラーテーブル hm500RT 870(幅)×310(奥行き)×40(高さ)

*仕様は一部変更する事があります。
*タイベックは、米国デュポン社の登録商標です。

スタンバイモード・省エネモード

- 待機中にもコンディションを維持するスタンバイモード機能を搭載しています。滅菌バッグを挿入しますと約4分で再起動する便利な機能です。
- 滅菌バッグが30秒間挿入されなかった場合には、シーリングローラーが自動的に停止する省エネモード設計です。再び滅菌バッグを挿入しますと省エネモードは解除される親切機能です。

シンプルな操作パネルとデジタル表示

- 操作パネルは、ピクトグラム表示で使いやすくレイアウトされており誰でも簡単に操作できます。
- 表示部は、確認しやすいデジタル表示を採用しています。



シール強度を向上させるシールシーム加工

- 滅菌バッグのシール幅12mmの中央部に圧着力を強化するためにシーム(シワ)加工をしています。プレ・ポストバキューム方式滅菌など過酷な滅菌条件にも滅菌バッグが破袋しない強度を保つ独自の方法です。



最適なシール温度

- 3パターンの温度設定から、ご使用の滅菌バッグの種類に対応した最適なシーリング温度を設定できます。


1	: 150℃～220℃
2	: 120℃～150℃
3	: 80℃～120℃

*シーリング温度は1℃単位で調整できます。
*タイベック製(プラズマ滅菌)の滅菌バッグにも対応します。

豊富なアクセサリー(別売付属品)

デイリーシールチェックシート

- デイリーシールチェックシートで作業前にシールの状態、パラメーター(温度・圧力・時間)をチェックできます。(250枚/1箱)

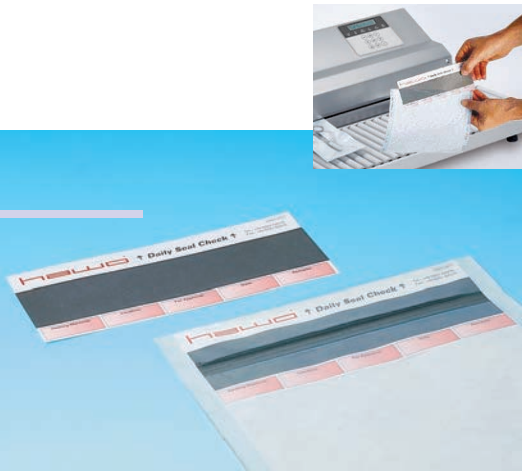

ローラーテーブル hm500RT

- ローラーテーブルをご使用いただければ大きな被滅菌物もスムーズに処理することができます。

