

医療用洗浄剤 LDシリーズ

一次処理

本洗浄

サビ除去

洗浄装置にも使用可能な低発泡多酵素洗浄剤



サビを素早く除去



素早く一次処理



手洗い洗浄
に最適



超音波洗浄
装置での
使用に最適



潤滑・サビ防止

潤滑とサビ防止を
同時処理



消毒・滅菌

ご使用にあたっての注意

- 使用中に誤って飲み込んだ場合や目に入った場合には、ただちに医師による処置を受けて下さい。
 - 使用中に気分が悪くなった場合には、ただちに十分な換気を行い、医師による処置を受けて下さい。
 - 各製品の正しい希釈方法に従ってお使い下さい。
 - ご使用になる際には、ラベルに記載されている“使用方法”と“注意書き”を厳守して下さい。
- ※改良のため、製品の仕様を予告なく変更する場合があります。



医療用洗浄剤 LDシリーズ



Canon

キヤノンメディテックサプライ株式会社

<https://mts.medical.canon>

2022年3月現在

医療用洗浄剤


LD シリーズ

医療用洗浄剤 LDシリーズは、人や環境にも優しい洗浄剤です。安全で効果的な洗浄をするために、多種多彩な洗浄剤を取り揃え、用途にあった洗浄剤をご紹介します。



対象物（器材）からあらゆる異物（汚れ）を除去することです。これは消毒や滅菌を効果的に行い、かつ器材の機能を維持するうえで非常に重要な役割を果たします。適切な洗浄を行うことが確実な消毒及び確実な滅菌につながります。もしも洗浄が不十分な場合は、消毒効果の減弱及び滅菌不良の原因となるため、すべての使用済み器材は消毒・滅菌前に十分な洗浄を行う必要があります。

多酵素洗浄剤 LD-1・LD-1s

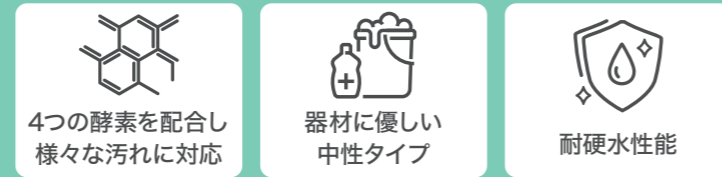

- 製品情報**
- 製品名：多酵素洗浄剤 LD-1 ●JANコード：4571142843375
 - 容量：4L ●pH：7.5 ●希釈：水10Lに原液75ml ●推奨温度：40℃
 - 製品名：多酵素洗浄剤 LD-1s ●JANコード：4571142843368
 - 容量：1L ●pH：7.5 ●希釈：水10Lに原液75ml ●推奨温度：40℃

潤滑・サビ防止剤 LD-6



- 製品情報**
- 製品名：潤滑・サビ防止剤 LD-6 ●JANコード：4571142843405
 - 容量：4L ●pH：7 ●希釈：LD-6：水=1：20 ●推奨温度：10～40℃



手洗浄用高発泡洗浄剤 LD-2



- 製品情報**
- 製品名：手洗浄用高発泡洗浄剤 LD-2 ●JANコード：4571142843382
 - 容量：4L ●pH：7 ●希釈：水10Lに原液75ml ●推奨温度：10～40℃



サビ除去剤 LD-7



- 製品情報**
- 製品名：サビ除去剤 LD-7 ●JANコード：4571142845898
 - 容量：4L ●pH：1 ●希釈：LD-7：水=1：1～1：7 ●推奨温度：10～40℃

超音波洗浄装置用洗浄剤 LD-3



- 製品情報**
- 製品名：超音波洗浄装置用洗浄剤 LD-3 ●JANコード：4571142843399
 - 容量：4L ●pH：7.5 ●希釈：水10Lに原液30ml ●推奨温度：20～50℃

手術器材用スプレー洗浄剤 LD-10



- 製品情報**
- 製品名：手術器材用スプレー洗浄剤 LD-10 ●JANコード：4571142845904
 - 容量：500ml ●pH：7 ●希釈：原液のまま噴霧 ●推奨温度：常温

